



[PRODUKTNAME] Blut-im-Stuhl-Test Selbsttest für Hunde	[TESTVERFAHREN] 1.Sammeln Sie Kot von Hund mit dem Probestäbchen (aus der Kloake oder vom Boden).
---	---

[VERPACKUNGSSPEZIFIKATION]
1 Test/Satz

VERWENDUNGSSZWECK] Der Blut-im-Stuhl-Test (Fecal Occult Blood Rapid Test) ist ein einfacher immunologischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis von verborgenem Blut (okkultes Blut) im Stuhl von Tieren. Der Test ist darauf ausgelegt, niedrigere Blutungs-niveaus im Magen-Darm-Trakt nachzuweisen als andere biochemische Methoden.	3. Nehmen Sie die Testkassette aus dem Folienbeutel und legen Sie sie horizontal hin.
	4. Tropfen Sie langsam 3 Tropfen der Probenlösung in die Probenvertiefung.
	5. Lesen Sie das Ergebnis nach 5–10 Minuten ab. Ergebnisse nach 10 Minuten gelten als ungültig.

Testdauer: 5-10 Minuten
Probe: Stuhl

Scannen Sie den QR-Code, 

[TESTPRINZIP]

Der FOB-Test verwendet eine immunchromatographische Sandwich-Methode, die auf zwei spezifischen monoklonalen Antikörpern basiert, um Hämoglobin in der Probe selektiv zu identifizieren. Das Ergebnis ist sehr spezifisch und leichter zu interpretieren als guajakbasierte Tests. Die Empfindlichkeit des Tests ist hoch und kann 200 ng/ml Hämoglobin im Stuhl nachweisen.

Wenn drei Tropfen Probe in die Probenvertiefung gegeben werden, wird die Probe durch Kapillarkraft absorbiert, mit hämoglobinspezifischem Antikörper-Farbkonjugat vermischt und über die Membran transportiert.


Liegt der Hämoglobinspiegel gleich oder über dem Schwellenwert, erscheint eine gefärbte Testlinie (T) und das Ergebnis ist positiv. Liegt der Hämoglobinspiegel bei null oder unter dem Schwellenwert, erscheint keine Testlinie und das Ergebnis ist negativ. Eine Kontrolllinie (C) muss immer erscheinen, um zu bestätigen, dass der Test korrekt durchgeführt wurde.

Anweisungen zu erhalten:



[INTERPRETATION DER TESTERGEBNISSE:]



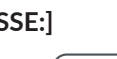

Positives Ergebnis:
Sowohl das C-Band als auch das T-Band sind sichtbar, unabhängig davon, ob das T-Band stark oder schwach

[KITBESTANDTEILE] 1 Testkassette 1 Pufferlösung 1 Tupferstab 1 Gebrauchsanweisung	Negatives Ergebnis: Nur ein deutliches C-Band ist sichtbar. Ungültiges Ergebnis: Es erscheint kein gefärbtes C-Band, unabhängig davon, ob d
--	--

1

Sammeln Sie den Kot mit dem Abstrichtupfer vom Boden.

2

Führen Sie den feuchten Tupfer in das mitgelieferte Pufferföhrchen ein. Mischen Sie gut, um eine gute Probenextraktion zu gewährleisten.

3

Nehmen Sie die Kassette aus dem Folienbeutel und legen Sie sie horizontal hin. Tropfen Sie dann langsam **3 Tropfen** der Probenlösung in die Probenverfugung.

4

Interpretieren Sie das Ergebnis innerhalb von 5-10 Minuten. Ergebnisse nach 10 Minuten gelten als ungültig.

Beachten Sie: Lesen Sie die Ergebnisse innerhalb der angegebenen Zeit ab. Eine Interpretation vor oder nach diesem Zeitraum kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

[VORSICHTSMASSNAHMEN]

Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Alle Reagenzien müssen Raumtemperatur haben, bevor der Test durchgeführt wird. Entnehmen Sie die Testkassette erst unmittelbar vor der Verwendung aus dem Folienbeutel. Verwenden Sie den Test nicht erneut. Verwenden Sie den Test nicht nach dem aufgedruckten Verfallsdatum. Alle Komponenten in diesem Kit wurden als Charge qualitätsgeprüft. Mischen Sie keine Teile aus unterschiedlichen Chargennummern.

[EINSCHRÄNKUNGEN]
Der Schnelltest auf okkultes Blut im Stuhl ist als einfacher Selbsttest zur Erkennung von verborgenem Blut im Stuhl von Tieren konzipiert. Wenn das Ergebnis positiv ist, sollten Sie umgehend einen Tierarzt zur weiteren Untersuchung und Bestätigung aufsuchen. Testergebnisse sollten stets im Zusammenhang mit den Symptomen des Tieres und einer professionellen tierärztlichen Beurteilung betrachtet werden.

Dieser Test ist ausschließlich für Stuhlproben vorgesehen. Die Verwendung mit anderen Probenarten wurde nicht validiert.

[LAGERUNG]
Bei Raumtemperatur (2–30 °C) lagern. Der Test ist bis zum auf dem Folienbeutel angegebenen Verfallsdatum (24 Monate) stabil. Nicht einfrieren. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Lieferant:
Guangzhou Herun Biopharm Co., Ltd.
Adresse: No.18, Shaobai Rd., Zengcheng District, Guangzhou City, P.R. China

Edition: 2025/02/25



[PRODUKTNAVN] Blod i Afføringstes Selvtest til hunde	[TESTFREMANGSMÅDE] 1.Saml afføring fra hund med podepinden (fra kloakken eller fra jorden).
--	---

[EMBALLAGESPECIFIKATION]
1 testsæt

[Tilsigtet brug]
Blod i Afføringsstesten (Fecal Occult Blood Rapid Test) er en enkel immunologisk hurtigttest til kvalitativ påvisning af skjult blod (occult blood) i afføring hos dyr. Testen er designet til at opdage lavere niveauer af blødning i mave-tarmkanalen end andre biokemiske metoder.

Analysetid: 5-10 minutter
Prøve: Afføring

[TESTPRINCIP]

FOB-testen anvender en immunokromatografisk sandwich-metode, der bygger på to specifikke monoklonale antistoffer til selektiv identifikation af hæmoglobin i prøven. Resultatet er meget specifikt og lettere at tolke end guaiac-baserede tests. Testens følsomhed er høj og kan påvise 200 ng/ml hæmoglobin i afføring. Når tre dråber prøve tilsættes i prøvebrønden, absorberes prøven gennem kapillærkraft, blandes med hæmoglobin-specifikt antistof-farvekonjugat og vandrer over membranen. Hvis hæmoglobinniveauet er lig med eller over grænseværdien, dannes et farvet testbånd (T), og resultatet er positivt. Hvis hæmoglobinniveauet er nul eller under grænseværdien, vises intet testbånd, og resultatet er negativt. Et kontrolbånd (C) skal altid fremtræde som bekræftelse på, at testen er udført korrekt.

en video og få detaljerede instruktioner.





[FORTOLKNING AF TESTRESULTATER:]




C
T

○ S



C
T

○ S

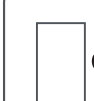

C
T

○ S



C
T

○ S

[TESTETS KOMPONENTER] 1 Testkassette 1 Plasttub med buffer 1 Prøvepind 1 Indlægsseddel	Positivt resultat: Både C-bånd og T-bånd ses, uanset om T-båndet er tydeligt eller svagt. Negativt resultat:
---	---

[OPBEVARING] Opbevares ved stuetemperatur (2–30 °C). Testen er stabil indtil udløbsdatoen (24 måneder), som er angivet på folieposen. Må ikke fryses. Må ikke opbevares i direkte sollys.	Ugyldigt resultat: Intet farvet C-bånd ses, uanset om T-båndet fremtræder. En ny test anbefales.
---	--

INSTRUKTIONER

1

eller

✗ Ikke bløtdagligt
 ✓ Tilrøddagligt
 ✗ Ubløddagligt

Opsaml afføring med pipespidsen fra jorden.

2

Før den fugtige pind ind i det medfølgende bufferrør. Rør rundt for at sikre en god ekstraktion af prøven.

3

Tag kassetten ud af foliesøgen og placer den vandret. Dryp derefter langsomt **3 dråber af** prøveekstraktet i prøvebrønden.

4

Fortolk resultatet inden for 5–10 minutter. Resultater efter 10 minutter anses som gyldige.

**Bemærk: Aflæs resultaterne inden for den angivne tid.
Tolkning før eller efter dette tidsrum kan føre til forkerte resultater.**

[FORHOLDSREGLER]
Følg instruktionerne nøje for det bedste resultat.
Alle reagenser skal have stuetemperatur, før testen udføres.
Tag ikke testkassetten ud af folieposen før umiddelbart inden brug.
Genbrug ikke testen. Brug ikke testen efter udløbsdatoen.
Alle komponenter i dette kit er kvalitetstestet som en batch. Bland ikke dele fra forskellige batchnumre.

[BEGRÆNSNINGER]
Blod i afføring hurtigttest er designet som en enkel selvtest til påvisning af skjult blod i dyrets afføring.
Hvis resultatet er positivt, bør du straks kontakte en dyrlæge for yderligere undersøgelse og bekræftelse. Testresultater skal altid vurderes sammen med dyrets symptomer og professionel dyrlægevejledning.

Denne test er kun beregnet til afføringsprøver. Brug med andre prøvetyper er ikke valideret.

Producent:
Guangzhou Herun Biopharm Co., Ltd.
Adresse: No.18, Shaobai Rd., Zengcheng District, Guangzhou City, P.R. Kina

Udgave: 2025/02/28


getTested

[TUOTENIMI] Veri Ulosteessa -Testi Itsetesti koirille	[TESTIMENETTELY] 1.Kerää koiran ulostetta näytteenottotikulla (maasta).
--	--

[PAKKAUKSEN MÄÄRITTELY] putkeen ja sekoita hyvin.
1 testi/sarja

[Tarkoitettu käyttö]
Veren esiintyminen ulosteessa -testi (Fecal Occult Blood Rapid Test) on yksinkertainen immunologinen pikatesti eläinten ulosteesta esiintyvän piilevän veren (occult blood) laadulliseen toteamiseen. Testi on suunniteltu havaitsemaan matalammat ruoansulatuskanavan verenvuodot kuin muut biokemialliset menetelmät.

Analyysiaika: 5–10 minuuttia
 Näyte: Uloste

Skannaa QR-koodi



[TESTIN PERIAATE]

FOB-testi käyttää immunokromatografista sandwich-menetelmää, joka perustuu kahteen spesifiseen monoklonaaliseen vasta-aineeseen hemoglobiiniin selektiiviseksi tunnistamiseksi näytteessä. Tulokset ovat erittäin spesifisiä ja helpompia tulkita kuin guaiakkiin perustuvat testit. Testin herkkyyys on korkea ja se voi havaita 200 ng/ml hemoglobiinia ulosteessa.

Kun kolme tippaa näytettä lisätään näytekuppaan, näyte imeytyy kapillaarivoiman avulla, sekoittuu hemoglobiinispesifiseen vasta-aine-värikonjugaatioon ja kulkeutuu kalvon yli. Jos hemoglobiinitaso on yhtä suuri tai suurempi kuin raja-arvo, muodostuu värillinen testiviiva (T) ja tulos on positiivinen. Jos hemoglobiinitaso on nolla tai alle raja-arvon, testiviivaa ei näy ja tulos on negatiivinen. Kontrolliviivan (C) tulee aina näkyä vahvistuksena siitä, että testi on suoritettu oikein.

[TESTITULOSTEN TULKINTA]

The diagram illustrates four possible test results for the FOB test, each shown in a rectangular frame with a circular control window at the bottom. The control window contains a small circle with a dot in the center, labeled 'S'.

- Positiivinen**: Shows a red line at the top (C) and a red line at the bottom (T).
- Negatiivinen**: Shows a red line at the top (C) and no line at the bottom (T).
- Virheellinen**: Shows a red line at the top (C) and no line at the bottom (T), but the control window (S) is empty.
- Virheellinen**: Shows a red line at the top (C) and no line at the bottom (T), but the control window (S) is empty.

[TESTIN KOMPONENTIT] 1 Testikasetti 1 Muoviputki, jossa puskuriliuos 1 Näytteenottotikku 1 Pakkausseloste	Positiivinen tulos: Sekä C-viiva että T-viiva näkyvät, riippumatta siitä, onko T-viiva selkeä vai heikko. Negatiivinen tulos: Vain selkeä C-viiva näkyy
---	---

[SÄILYTYS] Säilytä huoneenlämmössä (2–30 °C). Testi on käyttökelpoinen viimeiseen käyttöpäivään saakka (24 kuukautta), joka on merkitty foliopussiin. Ei saa pakastaa. Älä säilytä testiä suorassa auringonvalossa.	Virheellinen tulos: C-viivaa ei näy, riippumatta siitä, näkyykö T-viiva. Suositellaan uutta testiä.
--	--

OHJEET

1

Kärrä ulostetta näytetkulla maasta.

2

Aseta kostea tikku mukana toimitettuun buffertputkeen. Sekoita varmistaaksesi hyvän näytteen uuttamisen.

3

Ota kasetti foliopussista ja aseta se vaakasuoraan. Tiputa sitten hitaasti **3 pipaa** näyteutetta näytekuoppaan.

4

Tulkkaa tulos 5–10 minuutin kuluessa. Yli 10 minuutin jälkeen saadut tulokset katsotaan mitättömiksi.

Huom: Lue tulokset annetun ajan sisällä. Tulkinta ennen tai jälkeen tämän ajan voi johtaa virheellisiin tuloksiin.

Noudata ohjeita huolellisesti parhaan tuloksen saamiseksi.
Kaikkien reagenssien on oltava huoneenlämpöisiä ennen testin suorittamista. Älä ota testikasettia foliopussista ennen kuin juuri ennen käyttöä. Älä käytä testiä uudelleen. Älä käytä testiä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Käytä tämän testipaketin komponentit on laaduntarkastettu eränä. Älä sekoita osia eri eränumeroista.

[RAJOITUKSET]
Veren esiintyminen ulosteessa -pikatesti on suunniteltu yksinkertaiseksi kotitestiksi pienen verenhaittohavaitsemiseksi eläimen ulosteessa. Jos tulos on positiivinen, ota välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin lisätutkimuksia ja varmistusta varten. Testitulokset tulee aina arvioida yhdessä eläimen oireiden ja ammattilaisen eläinlääkäriarvion kanssa.

Tämä testi on tarkoitettu ainoastaan ulostenäytteille. Käyttö muiden näytetyyppien kanssa ei ole validoitu.

Valmistaja:
Guangzhou Herun Biopharm Co., Ltd.
Osoite: No.18, Shaobai Rd., Zengcheng District, Guangzhou City, P.R. Kiina

Painos: 2025/02/28