

# KWC

Professional

## Wandbatterien jetzt optional mit effektiver Sterilfiltration

Produkte in Perfektion



**Aqua free**  




# Effektive Sterilfiltration auf neuem Niveau

- Membranfilter: Integriert im schwenkbaren Auslauf der Armatur
- MetalSkin Medical®: Hochwirksamer Schutz vor retrograder Kontamination
- Standzeit bis zu 8 Wochen
- Nachhaltiges Mehrwegsystem: Kostengünstig und umweltfreundlich
- Schnelle und einfache Installation (Bajonettverschluss)
- Hervorragender Durchfluss auch bei schwierigen Verhältnissen im Leitungssystem



Filteradapter für F4 Wand-  
batterien (Mehrweg Sterilfilter  
Typ Aqua free Germlyser® neo A)

---

**ACXX1016 | 3600005555**



Filteradapter für F5 Wand-  
batterien (Mehrweg Sterilfilter  
Typ Aqua free Germlyser® neo A)

---


**ACXX1015 | 3600005556**

# 100 % Freiheit

**Könnte Ihnen bald die Arbeit erleichtern.  
Als technische Innovation integriert sich der  
Germlyser® neo A in den Armatur.**

Er bietet Ihnen hundertprozentigen Freiraum unter dem Wasserauslauf – und garantiert uneingeschränkte Wasserentnahme und komfortables Händewaschen.

Plus: der Auslauf ist schwenkbar, der Adapter ist in zwei Längen erhältlich. Ohne Verlust in der Nutzungshöhe: Effektiver Schutz vor wassergebundenen Mikroorganismen.

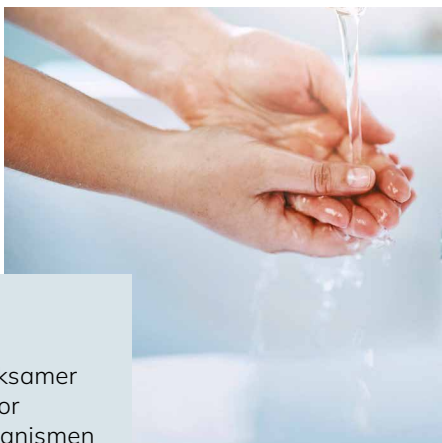

Hochwirksamer  
Schutz vor  
Mikroorganismen

## H2O Hygiene:

Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht die Verwendung von endständigen Wasserfiltern als präventive Schutzmaßnahmen in medizinischen Einrichtungen vor.

# 99,99999 % Rückhalt

**Der Germlyser® neo A ist ein C€ - gekennzeichnetes Medizinprodukt, ein endständiger Sterilfilter mit einer 0,2 µm Hohlfasermembran.**


Der Rückhalt von mindestens 7 Log-Stufen<sup>1</sup> nach dem Standard der FDA<sup>2</sup> bietet Schutz vor bakteriellen, nosokomialen Infektionskrankheiten: Insbesondere hervorgerufen durch kritische wasserassoziierte Keime wie Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia bzw. Staphylococcus aureus.

**Der Einsatz des Germlyser® neo A bietet sich in allen medizinischen Einrichtungen, insbesondere in Hochrisikobereichen, an.**

## Retrograder Schutz

Eine Beschichtung mit dem patentierten antimikrobiellen MetalSkin Medical® an der Strahlscheibe, abgerundete Kanten und ein hygienisches Design sowie bakteriostatisches Material im Gehäuse verhindern eine mögliche retrograde Kontamination (durch verkeimte Aerosole aus dem Abfluss oder Berührung).

**Ihre Patienten und Mitarbeiter: Geschützt und sicher.**

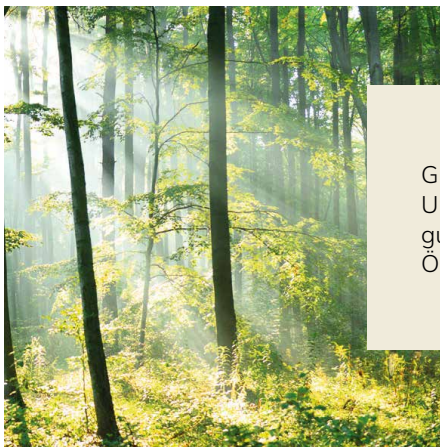

Gut für Ihr  
Unternehmen,  
gut für die  
Ökobilanz

# Nachhaltig & umweltbewusst

**Für eine Mietpauschale wird Ihnen der hochwertige Mehrwegfilter Germlyser® neo A zur Verfügung gestellt.**

Dieses Servicekonzept von Aqua free läuft wie ein Abonnement, unkompliziert und sicher: Vor Ablauf der Standzeit erhalten Sie neu aufbereitete Filter, auch der gebrauchte Filter wird vom Kurierdienst abgeholt und bei Aqua free in einem aufwändigen, validierten Verfahren gemäß RKI-Empfehlung aufbereitet. Der Adapter verbleibt an der Armatur, eingespart wird Kunststoff-Abfall, da nach Standzeit-Ende nur ein regelmäßiger Mehrwegfilter-Wechsel notwendig ist.

**Dieser Filterwechselservice ist weltweit einzigartig.**



# Einfache Installation

Mit nur wenigen Handgriffen ist der Germlyser® neo A installiert und kann sofort eingesetzt werden.



Zugelieferten Adapter mittels Einsteckanschluss in Armatur verschrauben.



Germlyser® neo A mittels Bajonettverbindung in Adapter befestigen.

## Für alle Selbstwechsler:

Mit unserer firmeneigenen App **HyGenius®** lassen sich Ihre Filterwechsel mit wenigen Klicks effizient und fehlerfrei organisieren.



HyGenius®



# **KWC Professional**

## **Werksanschrift**

KWC Aquarotter GmbH  
Parkstraße 1–5  
14974 Ludwigsfelde  
Deutschland

Tel. +49 3378 818-0  
kwc-info.de@kwc.com  
www.kwc-professional.com

## **Service | Kundendienst**

Tel. +49 3378 818-530  
kwc-kundendienst.de@kwc.com

## **Technische Hotline**

Tel. +49 3378 818-531  
kwc-hotline.de@kwc.com

# **Aqua free GmbH**

Winsbergring 31  
22525 Hamburg  
Deutschland

+49 40 468999-90  
info@aqua-free.com  
aqua-free.com